

## Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK

Side 1 av 7

Dokumentplassering:

II.MSK.Rad SSK.2.11.4-1

Godkjent dato:

30.11.2023

Gyldig til:

30.11.2025

Dato endret:

30.11.2023

Revisjon:

6.00

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/PACS/RIS - Arbeidsflyt/Beskrivelse

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Korrigert innholdsliste. Oppdaterte skjerm sparinger. Små omformuleringer.


### Innhold

1. Generelt.....	1
2. Beskrive .....	2
3. Kontrasignere.....	4
4. Manuell beskrivelse i DIPS (uten synkronisering med PACS) .....	5
5. Manuell beskrivelse i PACS (uten synkronisering med DIPS) .....	6
<b>Kryssreferanser .....</b>	<b>7</b>

### 1. Generelt

Vær svært oppmerksom på at synkronisering mellom DIPS og PACS kan falle ut! Kontroller alltid at samme pasient er aktiv i DIPS og PACS før beskrivelse opprettes. Ny synkronisering kan framtvinges ved å minimere og maksimere DIPS.

Dersom undersøkelsen i PACS markeres med et ikon med spørsmålstegn, er det ikke lenger samsvar mellom NORSSK-kodene i DIPS og PACS. Kontakt radiograf på lab eller radiologisk IT-personell for korrigering. Undersøkelsen kan beskrives manuelt i DIPS.

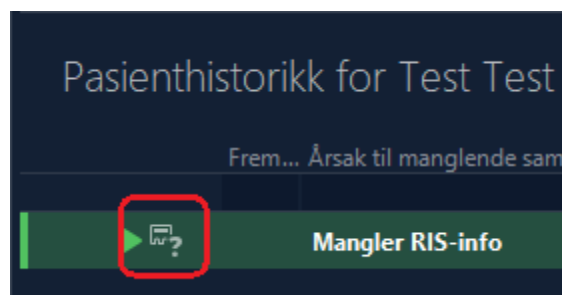

Arbeidsflyt og ansvarsforhold for oppfølging av utsendte radiologiske beskrivelser finnes i foretaksprosedyren «[Lese, vurdere og signere radiologiske svar i DIPS](#)».


DokumentID:D04585

Utarbeidet av: <b>Eva Garthus</b>	Fagansvarlig: <b>Arne Dybfest</b>	Godkjent av: <b>Heidi Kollstad</b>	Verifisert av: <b>□</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

 <b>SØRLANDET SYKEHUS</b>	<b>Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 7</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.2.11.4-1	Utarbeidet av: Eva Garthus	Fagansvarlig: Arne Dybfest	Godkjent dato: 30.11.2023	Godkjent av: Heidi Kollstad	Revisjon: 6.00

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/PACS/RIS - Arbeidsflyt/Beskrivelse

## 2. Beskrive

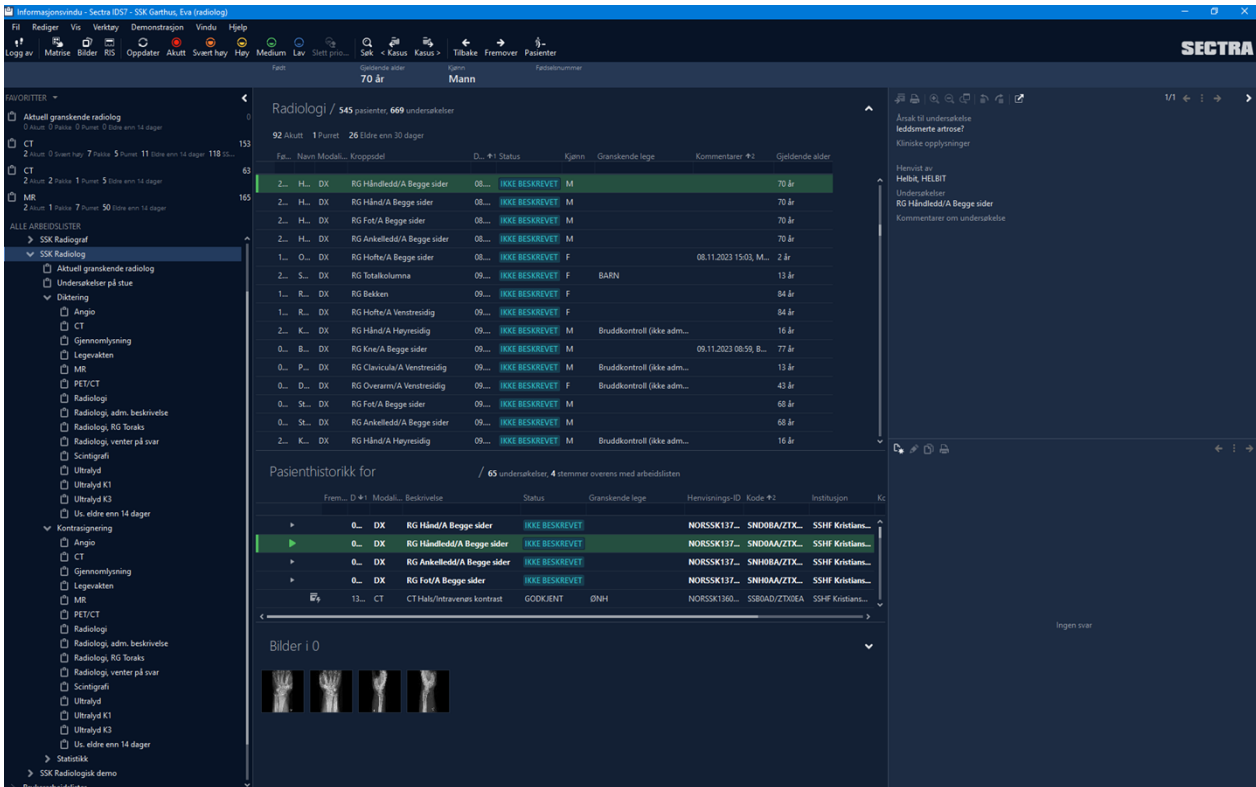


The screenshot shows the Sectra PACS interface. The main window displays a list of radiology examinations for a patient named '70 år Mann'. The list includes columns for patient information, exam details (e.g., '2. H., DX, RG Håndledd/A Begge sider'), and status ('IKKE BESKREVET'). Below the list, there is a 'Pasienthistorikk for' section showing a history of exams with similar details. The interface also features a left-hand menu with various tool options and a top navigation bar.


- I PACS: Velg arbeidsliste «SSK Radiolog» – «Diktering» – aktuell modalitet, eventuelt annen arbeidsliste
- Søk eventuelt opp pasient i PACS ved hjelp av fødselsdato eller navn
- Bildevinduet åpnes ved å dobbeltklikke på en undersøkelse i pasienthistorikken eller klikke på ikonet i verktøyraden
- Bytt til DIPS ved å klikke på ikonet på oppgavelinjen eller trykke «Alt + Tab»
- DIPS åpner automatisk vinduene «Radiologisk konsultasjon» og «Ny beskrivelse»
- **Kontroller at samme pasient er aktiv i DIPS og PACS!**
- Gamle beskrivelser gjenfinnes mange steder, blant annet:
  - DIPS: «Radiologisk historikk», «Alle journaldokumenter», arkfanen «Historikk» i konsultasjonsvinduet
  - PACS: Informasjonsvinduet, eller ved å trykke D i bildevinduet


	<b>Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK</b>				<b>Side: 3</b> <b>Av: 7</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.2.11.4-1	Utarbeidet av: Eva Garthus	Fagansvarlig: Arne Dybfest	Godkjent dato: 30.11.2023	Godkjent av: Heidi Kollstad	Revisjon: 6.00

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/PACS/RIS - Arbeidsflyt/Beskrivelse

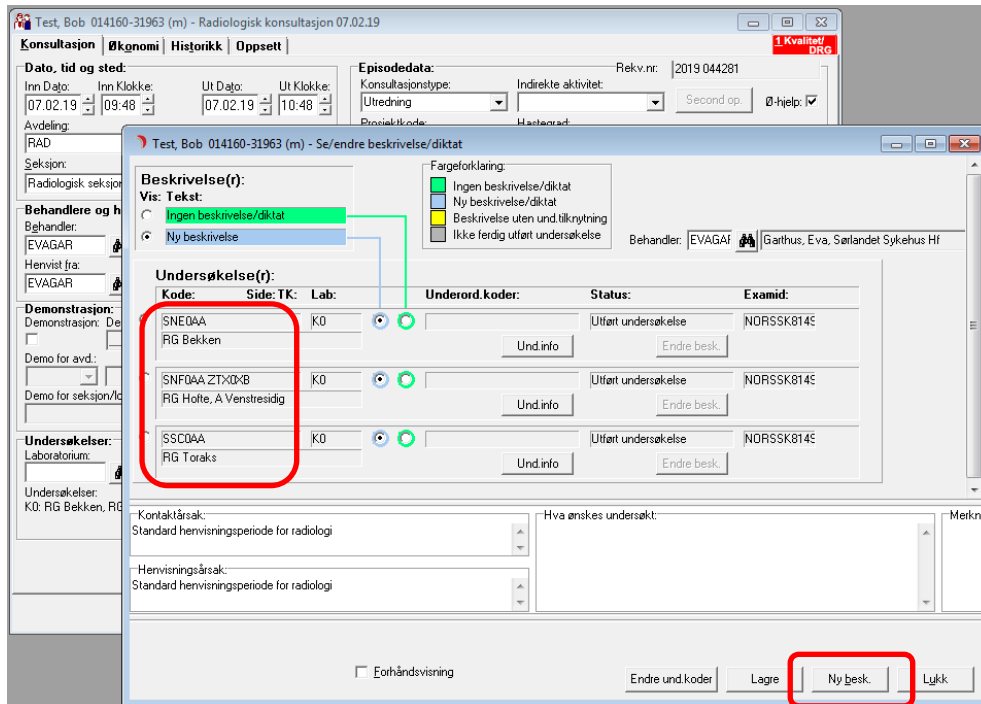

- Se gjennom listen over undersøkelser slik at du vet hvilke undersøkelser du skal beskrive samtidig (rtg. bekken, hofta og thorax i eksempelet ovenfor)
- Velg «Ny besk.»

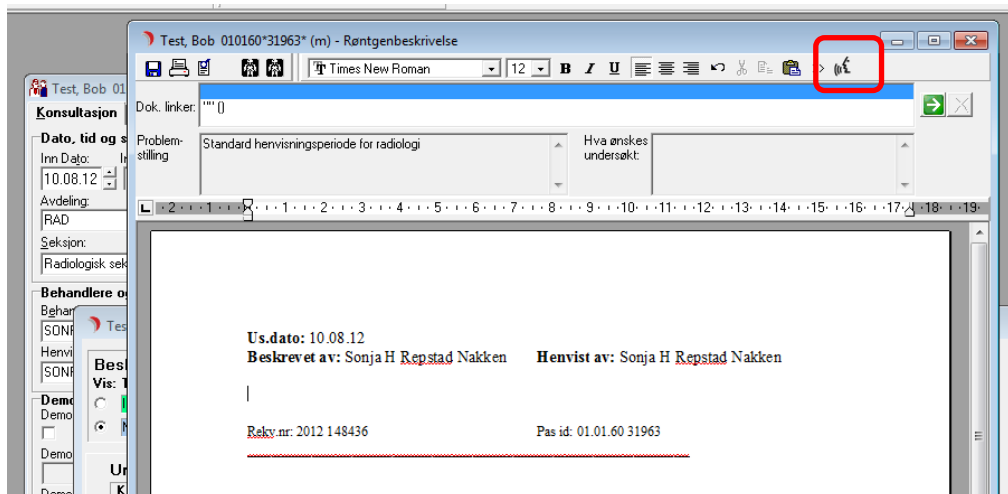

- For bruk av talegjenkjenning: Klikk på ikon for TGK 
- Les gjennom og korrigjer beskrivelse
- Lagre beskrivelse underveis i diktering: trykk «Ctrl + S»
- Godkjenn beskrivelse: «Ctrl + G», bekreft ved å klikke «Godkjenn» eller trykke «Enter»
- Trykk «Send» for å bekrefte at svar sendes ut
- Beskrivelsen sendes elektronisk til rekvirent og kopimottaker. Svar til mottakere uten mulighet for mottak av elektroniske svar blir automatisk skrevet ut i ekspedisjonen og behandlet videre av merkantilt personell.

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK</b>				<b>Side: 4 Av: 7</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.2.11.4-1	Utarbeidet av: Eva Garthus	Fagansvarlig: Arne Dybfest	Godkjent dato: 30.11.2023	Godkjent av: Heidi Kollstad	Revisjon: 6.00

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/PACS/RIS - Arbeidsflyt/Beskrivelse

### 3. Kontrasignere

- Aktiver pasienten i PACS, DIPS henter da automatisk opp den uferdige beskrivelsen
- Se gjennom og gjør eventuelle korrigeringer
- Lagre beskrivelse underveis i diktering: trykk «Ctrl + S»
- Godkjenn beskrivelse: «Ctrl + G», bekreft ved å klikke «Godkjenn» eller trykke «Enter»
- Trykk «Send» for å bekrefte at svar sendes ut
- Beskrivelsen sendes elektronisk til rekvirent og kopimottaker. Svar til mottakere uten mulighet for mottak av elektroniske svar blir automatisk skrevet ut i ekspedisjonen og behandlet videre av merkantilt personell

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK</b>				<b>Side: 5</b> <b>Av: 7</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.2.11.4-1	Utarbeidet av: Eva Garthus	Fagansvarlig: Arne Dybfest	Godkjent dato: 30.11.2023	Godkjent av: Heidi Kollstad	Revisjon: 6.00


Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/PACS/RIS - Arbeidsflyt/Beskrivelse

#### 4. Manuell beskrivelse i DIPS (uten synkronisering med PACS)

Dersom PACS er utilgjengelig kan bildene beskrives i DIPS hvis de er vurdert på modalitet.

Dersom det ikke er tatt bilder, for eksempel dersom det ikke lagres noen bilder ved en ultralyd-undersøkelse, finnes ikke undersøkelsen i PACS. Pasienten må da søkes opp manuelt i DIPS for diktering.


- Søk opp pasienten i DIPS med F11, eller aktiver aktuell pasient fra RIS arbeidsliste eller liknende

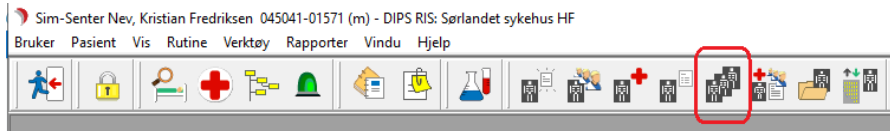

- Klikk på «Radiologisk historikk» på menylinjen, eller trykk «Shift + F7»

Und.dato	Kons.dato	Frikode	Herv. fra	Beh.lege	ØHjelp	Seksjon	Avd	LK	RNR	Rekv.nr
16.06.2022	16.06.2022	IØ	AMUBIR	KRIHER	Ja	Radiologisk seksjon	RAD			2020 866068
			SAAQAD			CT Caput	Godkjent beskrivelse			NORSSA13298880 Dahlslett, Kristine Hermansen, Sørlandet Sykehus Hf
			SSHQAP ZTXDEA			CTANG angiografi av hode og hals, Intravenøs	Godkjent beskrivelse			NORSSA13298881 Dahlslett, Kristine Hermansen, Sørlandet Sykehus Hf
10.06.2022	10.06.2022	IØ	OSCYST	LAUFRA	Ja	Radiologisk seksjon	RAD			2020 859665
			SAAQAD			CT Caput	Godkjent beskrivelse			NORSSK13293253 Frascheri-Verzelli, Laura, Sørlandet Sykehus Hf
			SSHQAP ZTXDEA			CTANG angiografi av hode og hals, Intravenøs	Godkjent beskrivelse			NORSSK13293254 Frascheri-Verzelli, Laura, Sørlandet Sykehus Hf

- Hver konsultasjon består av én hovedlinje pluss én linje per NRCP-kode i historikken. Dobbelklikk på øvre linje (linje med dato etc) for å åpne konsultasjonsvinduet. (Dobbelklikk på en av linjene med NRCP-kode for å dersom det foreligger en beskrivelse som skal redigeres/kontrasigneres.)

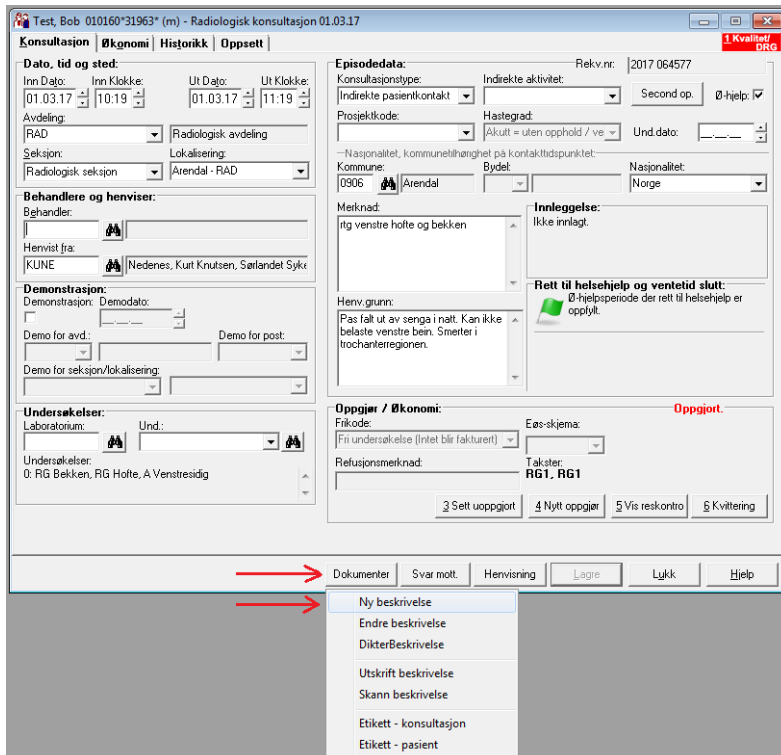

- Klikk «Dokumenter» – «Ny beskrivelse» rett og kontroller at du beskriver riktig undersøkelse.
- Klikk «Ny besk.» og fortsett som normalt.


		<b>Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK</b>			<b>Side: 6</b> <b>Av: 7</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.2.11.4-1	Utarbeidet av: Eva Garthus	Fagansvarlig: Arne Dybfest	Godkjent dato: 30.11.2023	Godkjent av: Heidi Kollstad	Revisjon: 6.00

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/PACS/RIS - Arbeidsflyt/Beskrivelse


## 5. Manuell beskrivelse i PACS (uten synkronisering med DIPS)

Ved stans i DIPS er det mulig å opprette beskrivelser manuelt i PACS. Disse beskrivelsene vil ikke bli automatisk overført til DIPS når stansen er over, men de kan kopieres manuelt fra PACS til DIPS.

- Aktiver aktuell undersøkelse i PACS. Ved DIPS-stans eller brokerstans blir ikke undersøkelsens status oppdatert i PACS og bildene kan derfor ligge i andre arbeidslister enn normalt, for eksempel på arbeidslistene i mappen SSK Radiograf.

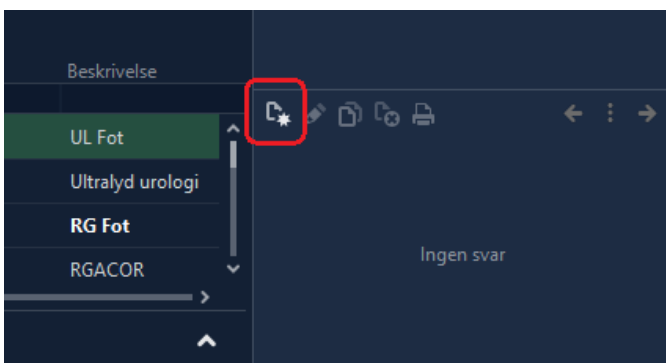

- Klikk på symbolet for «Ny tom beskrivelse»
- Skriv inn beskrivelsen. Talegjenkjenning fungerer ikke i PACS.

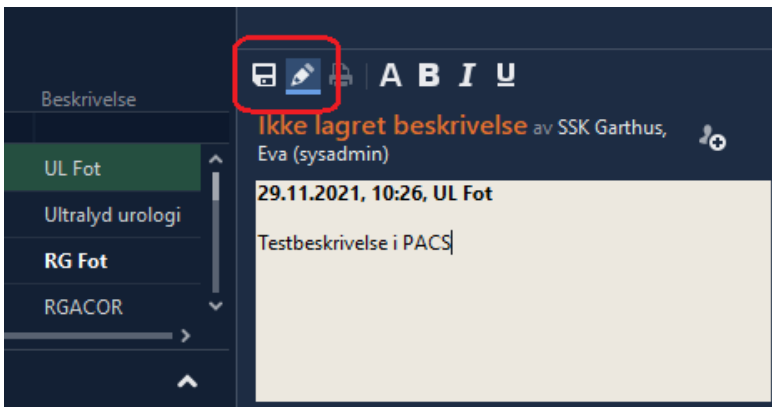

- Lagre beskrivelsen ved å trykke Ctrl + S eller klikke på symbolet for lagring
- En lagret beskrivelse kan redigeres ved å klikke på symbolet for redigering
- Når DIPS er tilbake i drift kan beskrivelsesteksten kopieres fra PACS til en ny beskrivelse i DIPS. Radiograf på lab eller radiologisk IT-personell kobler så undersøkelsen til riktig NORSSK-kode.

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>Beskrive og godkjenne undersøkelser i DIPS og PACS - Radiologisk avdeling SSK</b>				<b>Side: 7</b> <b>Av: 7</b>
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSK.2.11.4-1	Utarbeidet av: Eva Garthus	Fagansvarlig: Arne Dybfest	Godkjent dato: 30.11.2023	Godkjent av: Heidi Kollstad	Revisjon: 6.00

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSK/Pasienter og brukere/PACS/RIS - Arbeidsflyt/Beskrivelse

### Kryssreferanser

[II.MSK.Rad SSK.2.11.3-1](#) [Splitte og koble undersøkelser i PACS - Radiologisk avdeling SSK](#)

[II.MSK.Rad SSK.3-3](#) [Nødstansprosedyre - Radiologisk avdeling SSK](#)

### Eksterne referanser