

Hofteprotese hemi - Sementfri femur Corail  
Operasjonsenheten SSK

Side 1 av 3

Dokument ID:  
**II.SOK.AIO.SSK.2.or-75**

Godkjent dato:  
**24.09.2021**


Gyldig til:  
**24.09.2024**

Revisjon:  
**14.02**

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Pasienter og brukere/Ortopedi

| Lager 2 |                              |       |
|---------|------------------------------|-------|
| Ant     | Beskrivelse                  | Reol  |
|         | Hoftepakke-side(prosedyre)   | Hylle |
|         | Ortodriver/De sutter         | 1     |
| 3       | Frakk (X)XL+ L               | 7     |
| 2       | Lampeholdere                 | 9     |
| 3       | Kompresser                   | 10    |
| 1       | Dia m. røykavsug + forlenger | 14    |
| 1       | Sug (grønt)                  | 15    |
| 1       | Pulsavac skyllesystem        | 15    |
| 1       | Mepilex border 10x25         | 18    |
| 1       | EsySuit Lateral              | 22    |
| 1       | Strømpe                      | Hylle |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
| Lager 7 |                              |       |
| 7000    | Stor ortopedi rist           |       |
| 7400    | Gen totalprotese rist        |       |
| 7463    | Corail del 1+2               |       |
| 7454    | Hemiprotese ortomedic        |       |
|         | Tralle med implantater       |       |
| Suturer |                              | Nål   |
| 1       | Novosyn 1 HS40S              |       |
| 1       | Dafilon 2-0 til hud og dren  | DS24  |
|         | Premicron green 5            | HR 40 |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
|         |                              |       |
|         |                              |       |

| På forberedelsesrom   |
|---|
| Urinkateter til pose.   |
| Pakke inn foten i papir fra kne til tær.  |
| Dekke til/tape genitalia før desinfeksjon.  |
|   |
|   |
| Leiringsbeskrivelse   |
| Hofteprotese sideleie   |
|   |
|   |
|   |
| Desinfeksjon og dekking   |
| Klorhexidin 5 mg/ml.  |
| Vaske fra over hoftekammen og rundvaske til kneet.  |
| Dekke med u-laken fra hofte og opp og laken fra kneet og ned. Stort laken fra hofte og opp. |
| Drape over snittstedet.   |
|   |
| Corail finnes i tre utgaver:  |
| KS-Standard KA-Krage KLA-Lateralisert   |
|   |
| NB!   |
| Kontroller før operasjon at du har riktig prosedyre   |
| dvs at pasient skal ha usementert femur Corail  |
|   |

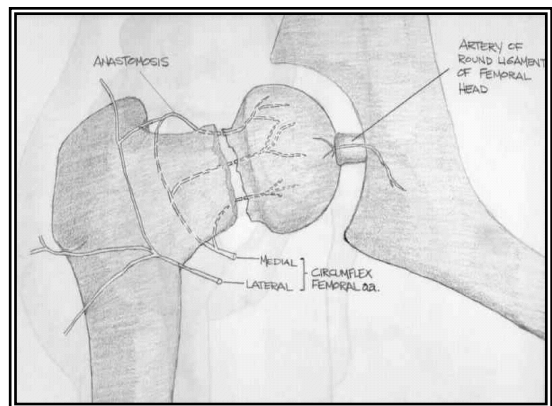

|  |   |                                  |                                 |                                |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  <b>SØRLANDET SYKEHUS</b> | <b>Hofteprotese hemi - Sementfri femur Corail</b><br><b>Operasjonsenheten SSK</b> |                                  |                                 | <b>Side: 2</b><br><b>Av: 3</b> |
|  | Dokument-id:<br>II.SOK.AIO.SSK.2.or-75  | Utarbeidet av:<br>Daniel Drifell | Fagansvarlig:<br>Daniel Drifell | Godkjent dato:<br>24.09.2021   |
| Revisjon:<br>14.02   |   |                                  |                                 |                                |

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Pasienter og brukere/Ortopedi

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Materialrom stue 1                            |
|  |  |  |   |
|  |  |  | Evt T-håndtak m mandreng til fjerning av CHP. |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

Ny leiring fra okt 2017: Kun vinklede sidestøtter uten gele eller grønne puter.

Rigging av bord til hemiprotese.  
Plassering av støtter på bordet.  
Merk at støtte nr. 2 kanskje må snues og støttene settes inn andre veien for å passe, avhengig av hvilken side pasienten skal opereres på. Skal stå ovenfra og ned.



Sideleie med venstre side opp. Ved høyre side opp må støtte nr. 2, som støtter mot crista, monteres motsatt vei. Da må de to justerbare armene settes inn andre veien.

|  |   |                                  |                                 |                              |   |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
|  <b>SØRLANDET SYKEHUS</b> | <b>Hofteprotese hemi - Sementfri femur Corail</b><br><b>Operasjonsenheten SSK</b> |                                  |                                 |                              | <b>Side: 3</b><br><b>Av: 3</b>          |
|  | Dokument-id:<br>II.SOK.AIO.SSK.2.or-75  | Utarbeidet av:<br>Daniel Drifell | Fagansvarlig:<br>Daniel Drifell | Godkjent dato:<br>24.09.2021 | Godkjent av:<br>Kristin Engenes Knudsen |

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Pasienter og brukere/Ortopedi

Operasjonsfremgangsmåte neste side:

En ser på bildet side 1 at blodsirkulasjonen til caput femoris kan bli ødelagt ved mediale collifemoris fracturer og at prognosen til caput da er dårlig. Derfor blir det nå oftere gjort hemiprotese for å skifte ut caput en gang for alle.

Buet snitt fra hoftekam ned mot låret. Trochanter fridissikeres og leddkapselen åpnes. Caput lukseres ut og collum sages av. Caput legges til side.

Femurskaftet stanses ut og rimes opp. Femur prøveprotese med prøvehode monteres og testes. En måler det uttatte caput med skyvelær og velger størrelse på bipolar head Depuy. En tester prøvehode og Mobile Cup mot pasientens acetabulum.

Corail sementfri femurprotese settes inn. Bipolar head (Depuy) og stålhode settes sammen (se bildet) og hofteleddet reponeres. Husk hanskeskift før implantasjon av femurprotesen.

Lagvis lukking av fascie og hud. Seksjonsleder får beskjed om hva som er brukt