

SPES. - STREKKBORD - OPERASJON - SSA

Side 1 av 2

Dokument ID:

II.SOA.AIO.OPA.2.div-64

Godkjent dato:

10.03.2023

Gyldig til:

10.03.2025

Revisjon:

0.10

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasienter og brukere/Diverse faglige retn.linjer

STREKKBORD


Utsatte områder :-

Nerver

- Nervus Brachialis
- Nervus Ulnaris
- Nervus Ischiadicus / Sciatica
- Nervus Peronius / Fibularis

Trykk

- Seteområdet
- Hæler
- Albuer
- Knehaser

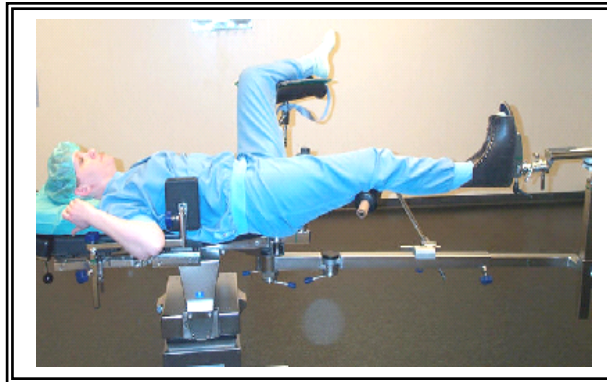

Strekkbordleie (femur fraktur)

UTSTYR	TILTAK	UTSATT
Armbord	<ul style="list-style-type: none"> - Armen aldri abdueres mer enn 90° - Polstring under albuer (spesielt under langvarig inngrep) - Armen skal helst ligge med håndflaten opp 	N. Brachialis N. Ulnaris
Armoppheng	<ul style="list-style-type: none"> - Skulder må hvile på underlaget - Underarmen må hvile i opphenget, unngå strekk/drag - Vurdere polstring av underarmen/albue 	N. Brachialis N. Ulnaris
Arm langs siden	<ul style="list-style-type: none"> - Polstring av albue før armen festes inn til siden med stikkklaken, ev bruk armskinne. Påse at fingrene ikke berører metall 	N. Ulnaris
Sidestøtte	<ul style="list-style-type: none"> - Sidestøtte polstres 	Crista Sete
Strekkinne	<ul style="list-style-type: none"> - Strekkinne posisjoneres slik det gir mist mulig trykk mot nervus femoralis helst litt ut på låret - Kontrollere at pinnen ikke trykker mot eksterne genitalier –obs urin kateter 	N.Femoralis Genitalia

Utarbeidet av:

Sp.spl. Collins, Jettestad,
Vaagland

Fagansvarlig:

Kristina Løvslund Huset,
Fagutv.spl.

Godkjent av:

Ikke styrt

 SØRLANDET SYKEHUS		SPES. - STREKKBORD - OPERASJON - SSA			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOA.AIO.OPA.2.div-64	Utarbeidet av: Sp.spl. Collins, Jettestad, Vaagland	Fagansvarlig: Kristina Løvslund Huset, Fagutv.spl.	Godkjent dato: 10.03.2023	Godkjent av: Ikke styrt	Revisjon: 0.10

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Pasienter og brukere/Diverse faglige retn.linjer

Benholder (motsatt side)	<ul style="list-style-type: none"> - Avstanden mellom benholder og bord reguleres etter pasientens kroppsstørrelse - Unngå hyperabduksjon i hofteleddene - Vinkel på benholdere reguleres for å unngå strekk på låret ikke mer enn 90° - Vurderer om at beina skal tas ned fra benholdere i en periode under langvarige inngrep (over 2 timer) - Benholdere polstres og posisjoneres for å unngå unødvendig trykk bak kneleddet og trykk bak på leggen - Beina festes med reim rundt leggene - Polstring under reim 	N. Femoralis N. Ishiadicus/Sciaticus N. Peronius / fibularis Leggene (trykk) Leggene (compartment syndrom)
Strek-skø (operasjons - side)	<ul style="list-style-type: none"> - Foten polstres godt med skummgummi, spes rundt hælen og vrist. - Kontrollere at foten sitter helt inn i skoa - Reimene skal strammes godt, unngå strikk effekt rundt ankelen 	N. Peronius/fibularis Hælene
Underlagt	<ul style="list-style-type: none"> - Tørt underlag, Obs ved desinfeksjon av operasjonsfelt! - Glatt underlag, rette ut krøller. 	Seteområdet

Kryssreferanser

[Utsatte nerver - Operasjon - SSA](#)

[Utsatte trykksteder ved leiring - Operasjon - SSA](#)