

Vasking og sterilisering av BARD MAGNUM biopsipistol

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.MSK.Rad SSA.8-2

Godkjent dato:

17.10.2022

Gyldig til:

17.10.2024

Dato endret:

17.10.2022

Revisjon:

2.03

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Opplæring/Kompetanse

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Papirversjon henger på skyllerommet i E-fløyen.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

1. Manuell vasking:

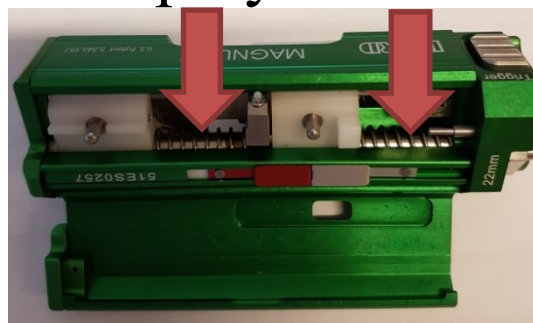
- Sett biopsipistolen i 22 mm-posisjon.
- Skyll av synlig søl med dekslet åpent. 22 mm-posisjonen gir den mest optimale tilgangen for innvendig rengjøring. Aktiver instrumentet et par ganger for å få skylt over alt.

**2. Utstyrdekontaminator:**

- Legg deretter biopsipistolen i utstyrdekontaminatoren med lokket åpent og med den innvendige mekanismen vendt oppover.
- Ikke legg annet utstyr oppå biopsipistolen.

3. Smøring:

- Etter vask i dekontaminator må pistolen smøres for å unngå at mekanismen i pistolen tørker ut og funksjonen forringes.
- Pistolen sprayeres innvendig med Premixslip.
- Premixslip brukes som den er og skal ikke fortynnes. Ristes før bruk.
- Husk å bruke hansker ved påføring.
- Spray på de bevegelige leddene inne i biopsipistolen
- La premixslip virke i 30 sekunder.
- Lad og avfyr pistolen noen ganger for at smøring skal komme inn i alle gjenger, og gjenta smøringen om pistolen er treg.
- Overflødig væske på utsiden tørkes bort med en kompress/klut som ikke loer.
- Biopsipistolen er nå klar for sterilisering.
- Biopsipistolen skal ligge åpen når den leveres til sterilisering.

**Sprayeres her**

DokumentID:D43477

Utarbeidet av:
Darlene SandvikFagansvarlig:
Darlene SandvikGodkjent av:
Avd. leder Inger Wenche NilsenVerifisert av:
[]