

Hånddermatom Acculan4- Operasjon- SSA

Dokumentplassering:
II.SOA.AIO.OPA.2.IN.pl-6

Godkjent dato:
02.10.2024

Revideres innen:
02.10.2026

Sist endret:
02.10.2024


Versjon:
0.02

Klinikknivå\Somatikk Arendal\Anestesi, intensiv, operasjon\OPERASJON\Pasienter og brukere
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 02.10.2026

ANTALL	STK.	INSTRUMENTER	CAT. NR.
	1	Hånddermatom Acculan 4	GA340
	1	Lokk	GA678
	1	Batterihylse	GA675
	1	Klaffepinne	
	1	Mutter (gull)	
	10	Klaffer	
INSTRUMENTER	15		

DEMONTERING AV KLAFFER PÅ DERMATOMET

1. Åpne hodet (1) og ta ut knivbladet.
2. Skru av mutteren (2) i gull.
3. Skyv klaffepinnen (18) 4mm til siden og vri på pinnen slik at den kan tas ut.
4. Dra av alle klaffene.

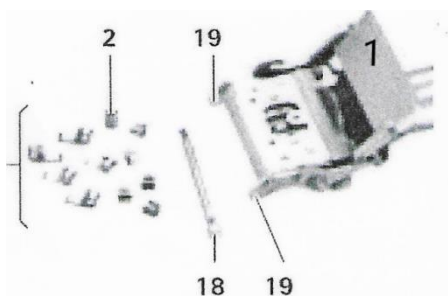

Hånddermatomet vaskes med bryter opp! Lokket skal være av under vask!

Lagt av:	Dato	Kontroll før opr. DATO:	Kontroll etter opr. dato:

EKSTRA INSTRUMENTER	EKSTRA INSTRUMENTER

Utarbeidet av: Grethe Espenes Paulsen	Fagansvarlig: Grethe Espenes Paulsen	Verifisert av:	Godkjent av: <ikke styrt>	Dok.nr: D55506
---	--	----------------	---	--------------------------