

Rusmiddeltesting i urin - prøvetaking innen SSHF

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.DKS.MBio.6.3.2-8

Godkjent dato:

28.04.2023

Gyldig til:

28.04.2025

Dato endret:

28.04.2023

Revisjon:

7.00

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Avd for medisinsk biokjemi SSK/Kjernevirksomhet/Pre- og postanalytisk enhet/Prøvetaking

DISTRIBUSJONSliste: EK, Laboratoriehåndboken

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Endret mal/skrifttype.

HENSIKT:

Prosedyren skal sikre god kvalitet på urinprøvene til rusmiddeltesting avlevert i medisinsk sammenheng. Prosedyren skal sikre prøvenes kvalitet og integritet fra prøvegiver til analysemaskin.

OMFANG:

Prosedyren gjelder for alle som bistår pasienter/klienter med urinprøvetaking til rusmiddeltesting.

UTFØRELSE:

Prøvetaker må identifisere prøvegiver før prøvetaking, og kontrollere at nødvendig informasjon om hensikten med prøven er mottatt. Bestilling fylles ut enten på papirrekvisisjon eller elektronisk (IHR). Prøvetaker skal overvåke prøveleveringen og bidra til at det ikke manipuleres med prøven. Ved mistanke om manipulering skal ny prøve tas. Medbrakt prøve må ikke aksepteres. Se ellers Prosedyrer for rusmiddeltesting, fra Helsedirektoratet.

Prøve avleveres i egnet og ren kopp/container. En del av prøven overføres fra kopp/container til Urin-Monovette® for innsending til laboratoriet.





Figur 1: Ta av proppen og sett på spissen. Spissen føres ned i urinen. Stempelet trekkes opp til streken.

Figur 2: Monovetten vendes med spissen opp, og stempelet trekkes helt ned.

Figur 3: Ta av spissen, sett på proppen og knekk av stempelet.

Figur 4: Prøven merkes med strekkodeetikett fra rekvisisjonen evt. prøveetikett fra IHR, langsetter røret.

(Prøven kan eventuelt merkes med pasientens navn og 11-sifret fødselsnummer).

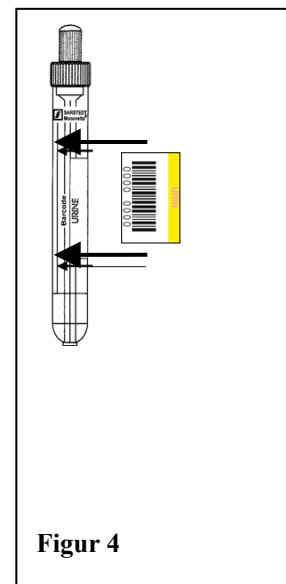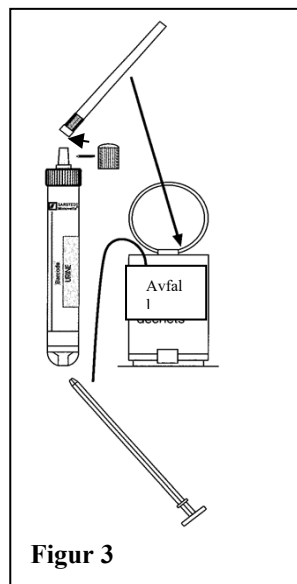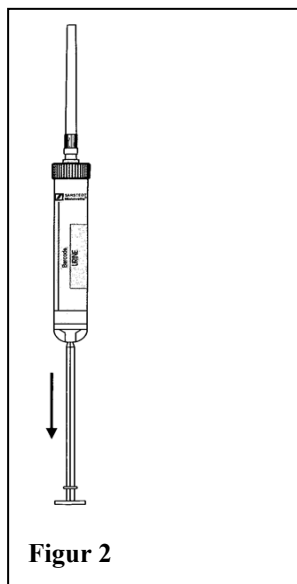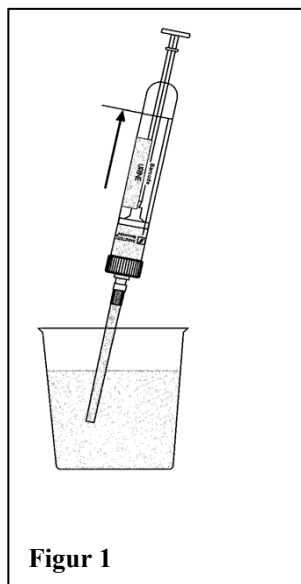

Prøven bringes til laboratoriet på en sikker måte sammen med utfylt rekvisisjon.

Monovetter, rekvisisjoner, transporthylser og forsendeskonvolutter bestilles fra Sentrallageret ved SSHF.

DokumentID:D23034

Utarbeidet av: Nils Tryland	Fagansvarlig: Enhetsleder Nils Tryland	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Verifisert av: 28.03.2023 - Nils Arne Tryland, 27.04.2023 - Kvalitetskoordinator Ingunn Gåsvær, 17.10.2025 - Kvalitetskoordinator Ingunn Gåsvær, 24.11.2025 - Kvalitetskoordinator Inger Anne Tveit, 23.12.2025 - Siri Cathrine Rølland
---------------------------------------	--	--	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Rusmiddeltesting i urin - prøvetaking innen SSHF				Side: 2 Av: 2
Dokumentplassering: II.DKS.MBio.6.3.2-8	Utarbeidet av: Nils Tryland	Fagansvarlig: Enhetsleder Nils Tryland	Godkjent dato: 28.04.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Marianne Skomedal	Revisjon: 7.00

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Avd for medisinsk biokjemi SSK/Kjernevirksomhet/Pre- og postanalytisk enhet/Prøvetaking

Ekstern referanse: Veileder fra Helsedirektoratet, IS-2231; Prosedyrer for rusmiddeltesting.
www.helsedirektoratet.no.