

Prøvetaking på ultralyd, Rad. avd. SSA

Side 1 av 5

Dokumentplassering:
II.MSK.Rad SSA.2.11-9

Godkjent dato:
13.03.2025

Gyldig til:
13.03.2027

Dato endret:
13.03.2025

Revisjon:
1.20

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Pasienter og brukere/Ultralyd

DISTRIBUSJONSliste: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 13.03.2027 uten endringer i dokumentet.

PRØVETAKING pleuravæske, abcess, acites, leddvæske og tumores.

Rekvirering i DIPS:	Organ	Prøveglass/volum	Husk alltid dato og klokkeslett	Levering
Rekvirering i DIPS: Leukocyter Mononukleære celler diff. Polynukleære celler diff. Utstryk av leddvæske	PLEURAVÆSKE, ACITESVÆSKE, LEDDVÆSKE, + DIVERSE KROPPSVÆSKER	4ml EDTA prøvetakingsrør (Lilla kork)  Fyll prøverøret. Minimum: 1 ml Maksimum: 4 ml Bland umiddelbart røret etter prøvetaking.	Etikett merket MEDBIO. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten.	Leveres raskt til prøvemottak ved laboratoriet. Prøven må analyseres innen 2 timer.
Rekvirering i DIPS: Glukose LD Kolesterol Totalprotein Ferritin Triglyserider Amylase,pankreas Albumin Bili Lipase	PLEURAVÆSKE, ACITESVÆSKE, LEDDVÆSKE, + DIVERSE KROPPSVÆSKER	 Sterilt prøvetakingsrør Fyll prøverøret.	Etikett merket MEDBIO. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten.	Leveres raskt til prøvemottak ved laboratoriet.

DokumentID:D45595

Utarbeidet av:
Darlene Sandvik

Fagansvarlig:
Kristine Hermansen Dahlslett

Godkjent av:
Avd. leder Inger Wenche Nilsen

Verifisert av:


Dokumentplassering:
II.MSK.Rad SSA.2.11-9

Utarbeidet av:
Darlene Sandvik

Fagansvarlig:
Kristine Hermansen Dahlslett

Godkjent dato:
13.03.2025

Godkjent av:
Avd. leder Inger Wenche Nilsen

Revisjon:
1.20

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Pasienter og brukere/Ultralyd

Rekvirering i DIPS: <u>Pv-pH i pleuravæske</u>	PLEURAVÆSKE Anaerob prøvetaking.	 Anaerob prøvetaking. Bland sprøyten umiddelbart etter prøvetaking.	Etikett merket MEDBIO. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten.	Leveres raskt til prøvemottak ved laboratoriet.
Rekvirering i DIPS: Bakterier i ønsket materiale Bestilt analyse: Us-Aerob dyrkning Us-Anaerob dyrkning Us-Sopp	PLEURAVÆSKE, ACITESVÆSKE, LEDDVÆSKE, + DIVERSE KROPPSVÆSKER	 Fyll prøverøret	Etikett merket MIK. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten.	Leveres til prøvemottak ved laboratoriet.
Rekvirering i DIPS: Blodkulturflaske væske til dyrkning Bestilt analyse: Us-aerob anriket dyrkning	PLEURAVÆSKE, ACITESVÆSKE, LEDDVÆSKE, + DIVERSE KROPPSVÆSKER	 Aerobic/F: Grå / blå topp 3-10 ml Optimal fylling: 8-10ml	Etikett merket MIK. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten.	Leveres til prøvemottak ved laboratoriet.
Rekvirering i DIPS: Blodkulturflaske væske til dyrkning Bestilt analyse: Us-anaerob anriket dyrkning	PLEURAVÆSKE, ACITESVÆSKE, LEDDVÆSKE, + DIVERSE KROPPSVÆSKER	 Anaerobic/F: Lilla topp 3-10 ml Optimal fylling: 8-10ml	Etikett merket MIK. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten.	Leveres til prøvemottak ved laboratoriet.

 SØRLANDET SYKEHUS	Prøvetaking på ultralyd, Rad. avd. SSA				Side: 3 Av: 5
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSA.2.11-9	Utarbeidet av: Darlene Sandvik	Fagansvarlig: Kristine Hermansen Dahlslett	Godkjent dato: 13.03.2025	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 1.20

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Pasienter og brukere/Ultralyd

Rekvirering i DIPS: Blodkulturflaske væske til dyrkning Bestilt analyse: Us-Aerob <u>anriket</u> dyrkning	PLEURAVÆSKE, ACITESVÆSKE, LEDDVÆSKE, + DIVERSE KROPPSVÆSKER	 Peds Plus/F: Rosa /sølv topp 0,5-5 ml Benyttes kun ved <u>lite prøvemateriale</u>	Etikett merket MIK. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten.	Leveres til prøvemottak ved laboratoriet.
Rekvirering i DIPS: Sørlandet Sykehus HF Enhet for patologi Kristiansand Bestilt analyse: CYTOLOGI	PLEURAVÆSKE, ACITESVÆSKE, LEDDVÆSKE, + DIVERSE KROPPSVÆSKER	 Steril universalbeholder 20 ml Ufiksert prøvemateriale	Etikett merket Patolog. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten.	Leveres til patologisk laboratorium
Rekvirering i DIPS: Bestilt analyse: Us-Mykobakterie dyrkning/ PCR/TBC Atypiske mykobakterier	PLEURAVÆSKE CYSTEVÆSKE ABDOMEN THYROIDEA	 Steril universalbeholder Fyll prøveglasset. Så mye materiale som mulig.	Etikett merket MIK. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten.	Leveres til prøvemottak ved laboratoriet.
Ønsket analyse: Flowcytometri i pleuravæske. Papirrekvisisjon: Cytologi Oslo Universitetssykehus Avdeling for patologi Noter ønsket analyse: Flowcytometri	PLEURAVÆSKE	 Sterilt prøvetakingsrør Fyll prøverøret. Så mye materiale som mulig.	Merkes med navneetikett fra DIPS skrevet ut i ekspedisjonen. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten	Leveres til prøvemottak ved laboratoriet.

Dokumentplassering:
II.MSK.Rad SSA.2.11-9

Utarbeidet av:
Darlene Sandvik

Fagansvarlig:
Kristine Hermansen Dahlslett

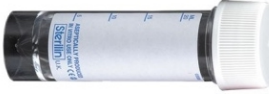
Godkjent dato:
13.03.2025

Godkjent av:
Avd. leder Inger Wenche Nilsen

Revisjon:
1.20

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Pasienter og brukere/Ultralyd

BIOPSIER

Rekvirert på papir eller pasient i Dips	Organ	Prøveglass/medium	Etikett	Levering
Sørlandet sykehus HF Avdeling for patologi Kristiansand HISTOLOGISK UNDERSØKELSE	Lever og biopsier av andre tumores.	 20 ml prøvetakingsglass med Formalin 10%	Etikett merket Patolog. Noter dato og prøvetakingstid på etiketten	Leveres til patologisk laboratorium
Ved vanlig nefrologisk utredning: Rikshospitalet Avdeling for patologi REKVISISJON TIL HISTOLOGISK UNDERSØKELSE Ved kreftutredning: Sørlandet sykehus HF Avdeling for patologi Kristiansand HISTOLOGISK UNDERSØKELSE	Nyrer Spørsmål om nyreparanchym Skal ha begge prøveglass og nefrolog skal tilkalles. (Henvisende lege) Spørsmål om tumor (kreft) skal kun legges på FORMALIN	 *FORMALIN 10% *GLUTARALDEHYD 2% 20 ml Lite prøvetakingsglass Prøvetakingsglass med Glutaraldehyd med Formalin	Merkes med navneetikett fra DIPS skrevet ut i ekspedisjonen om de skal til Rikshospitalet. Etikett merket Patolog om de skal til Kristiansand (SSHF). Noter dato og prøvetakingstid på etiketten	Leveres til patologisk laboratorium
Sørlandet sykehus HF Enhet for patologi Kristiansand	THYROIDEA (FNAC)	 Utstryksglass/ objektglass	Merkes med navn og fødselsdato på samme side som utstryket. Bruk blyant, og merk	På FNAC dager sees disse på av patolog på A7, nr. til patolog tlf 5227.

 SØRLANDET SYKEHUS	Prøvetaking på ultralyd, Rad. avd. SSA				Side: 5 Av: 5
Dokumentplassering: II.MSK.Rad SSA.2.11-9	Utarbeidet av: Darlene Sandvik	Fagansvarlig: Kristine Hermansen Dahlslett	Godkjent dato: 13.03.2025	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 1.20

Medisinsk serviceklinikk/Radiologisk avdeling SSA/Pasienter og brukere/Ultralyd

CYTOLOGI	CYTOLOGISKE UTSTRYK	6 stk (+ ett som brukes til å stryke ut cytologien med) Ingen fiksering	objektglassene før utstrykene lages, for å unngå kontaminasjon. Lufttørkes. Lag rekvisisjon selv og skriv ut etiketter etter prøvetaking og radiolog har skrevet inn opplysninger.	Patolog sjekker om det er tilstrekkelig prøvemateriale før pasienten sendes. Ved øhj. FNAC leveres glassene på patologen uten at noen ser på om prøvematerialet er tilstrekkelig, da patolog ikke er tilstede.
<u>Viktige tlf: dagtid 4558, vakttid 5294, Louise Myrland 5222</u>				
*Glutaraldehyd 2% må hentes på pat.lab i 3. etasje for hvert enkelt tilfelle (den står i kjøleskapet). Et tomt glass må medbringes, og fylles under avtrekksvifta oppe på pat.lab. Glasset må merkes med styrke og innhold				
Viktig: prøvene tas med en Vacuette  legges sterilt på bordet og bruk en Alcho Swab til å tørke av prøveglasset med 				
Prøvetaking/biopsier tas fortrinnsvis på dagtid. Evt. må det avtales med laboratoriet når prøvene kan leveres.				

Kryssreferanser:

Eksterne referanser: